



LINEA CORPORAL

MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 MINI

MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 MINI



DESCRIPCIÓN

La Multifuncional 3 en 1 Mini es un equipo estético portátil y compacto, ideal para tratamientos corporales y faciales. Con una pantalla de 4.3 pulgadas, su diseño es perfecto para uso doméstico y a domicilio. Utiliza cavitación de 40 kHz para reducir grasa localizada y modelar la figura, mientras que la radiofrecuencia de 5 MHz mejora la apariencia de la celulitis y reafirma la piel. Además, estimula la producción de colágeno, tonifica los músculos, suaviza arrugas y rejuvenece el rostro. Facilita el drenaje linfático y mejora la circulación sanguínea.

Su potente sistema de 50 W y cabezales de RF de 3 y 4 polos permiten adaptarse a diferentes áreas del cuerpo y rostro. Fabricado en ABS y metal, es resistente, duradero y fácil de usar. Ideal para acelerar la recuperación postoperatoria. Con un voltaje adaptable de 110V a 220V, es un equipo versátil y eficaz.

ANALISIS Y USO



Selección del tratamiento:

Cavitación (40 kHz): Selecciona este modo para tratar áreas de grasa localizada. Ideal para abdomen, muslos, brazos o zonas específicas donde se requiere moldear el contorno corporal. **Radiofrecuencia (5 MHz):** Elige este modo para reducir la celulitis, reafirmar la piel y mejorar la apariencia de la piel en general. También es ideal para rejuvenecer el rostro y suavizar arrugas.

Uso de los cabezales:

Cabezal de cavitación: Utiliza este cabezal en áreas de grasa localizada. Realiza movimientos circulares suaves en la piel durante el tratamiento, asegurándote de cubrir bien toda la zona. **Cabezal de RF de 3 polos y 4 polos:** Para tratar la celulitis, reafirmar la piel y tonificar los músculos, coloca el cabezal sobre la piel y mueve lentamente, siguiendo la dirección del contorno corporal o facial. Ajusta el cabezal según la zona: el de 3 polos es ideal para áreas más pequeñas, mientras que el de 4 polos es más adecuado para áreas más grandes.


Duración del tratamiento:

Cavitación: Los tratamientos de cavitación suelen durar entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la zona tratada. Evita un uso excesivo en la misma área para no causar molestias. **Radiofrecuencia:** Aplica durante 15 a 20 minutos por sesión. Puedes hacer sesiones diarias o 2-3 veces por semana para obtener resultados óptimos.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Reducción de grasa localizada
- Mejora de la apariencia de la celulitis
- Reafirmación y tonificación de la piel
- Rejuvenecimiento facial
- Mejora de la circulación sanguínea
- Drenaje linfático
- Aceleración de la recuperación postoperatoria
- Tratamientos personalizables y versátiles

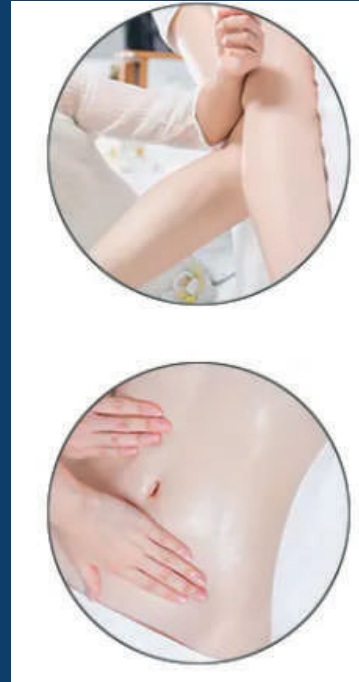

Resultados:

- Reducción de la grasa abdominal y corporal en áreas específicas.
- Piel más firme y tonificada, con la mejora visible de la textura.
- Disminución de la celulitis y suavizado de la piel.
- Rejuvenecimiento facial con un aspecto más joven y sin arrugas o líneas finas.
- Piel más saludable gracias a la mejora de la circulación y drenaje linfático.
- Aceleración en la recuperación postoperatoria, ayudando a reducir inflamación y molestias





MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 MINI

Especificaciones Técnicas

Frecuencia de cavitación 40 kHz

Frecuencia de radiofrecuencia (RF) 5 MHz

Nivel de intensidad RF 10 niveles ajustables

Cabezal RF Cabezal de 3 polos: 24V, 3 MHz, 1W
Cabezal de 4 polos: 66V, 3 MHz, 35W

Potencia 50 W

Pantalla 4.3 pulgadas (aproximadamente)

Voltaje 110V (compatible con 100V a 220V)

Peso del paquete 3.4 kg (aproximadamente)

Cabezal 40K 150V, 40 kHz, 25W



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec