



LINEA FACIAL

SPA OCULAR REJUVENECEDOR



SPA OCULAR REJUVENECEDOR



DESCRIPCIÓN

Es un dispositivo innovador diseñado para el cuidado integral de los ojos. Combina tecnología de nebulización nano y masaje térmico, ofreciendo alivio efectivo para la sequedad ocular, hinchazón, fatiga y molestias causadas por el uso prolongado de pantallas. Este equipo proporciona una hidratación profunda gracias a sus partículas nano, promoviendo la relajación y rejuvenecimiento ocular. Ideal para personas que trabajan largas horas frente a computadoras o estudian intensamente, ayuda a revitalizar los ojos y prevenir el estrés ocular. Su diseño compacto y ligero lo hace fácil de transportar, perfecto para uso en casa, oficina o incluso durante viajes. Es una solución práctica tanto para el cuidado personal como para su aplicación profesional en salones de belleza. Mejora la circulación alrededor de los ojos y reduce los signos de cansancio, ofreciendo

ANALISIS Y USO

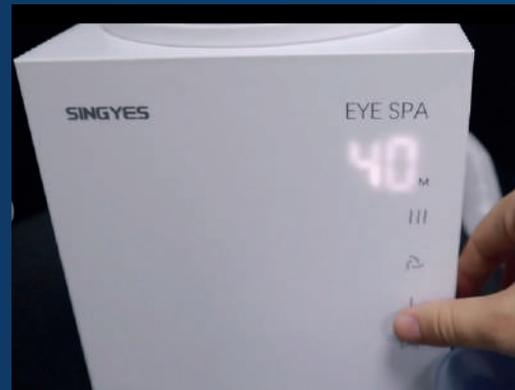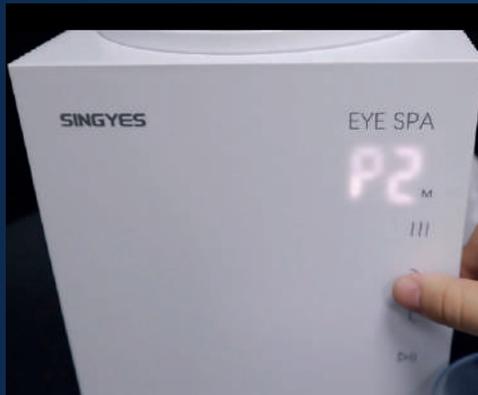

Procedimiento del Tratamiento:

-Encendido y Configuración Inicial:

Al encender, el masajeador emite un pitido y entra en estado de espera. La pantalla digital muestra "88" antes de apagarse.

El masajeador comienza automáticamente en el modo predeterminado: 15 minutos de tratamiento con niebla fría (P3).

-Ajustes Personalizados:

Tiempo: Se puede ajustar el tiempo de uso (hasta 25 minutos) tocando el botón para configurarlo en intervalos de 5 minutos.

Volumen de Niebla: El volumen de niebla puede ajustarse entre tres niveles (P1, P2, P3).

Modo de Calefacción: Se puede activar o desactivar en cualquier momento. Cuando está encendido, la luz del tanque es naranja o púrpura.

-Proceso de Tratamiento:

El masajeador alterna entre niebla fría y caliente, ayudando a abrir los poros y a hidratar la piel.

El tratamiento dura hasta 15-25 minutos dependiendo del tiempo configurado.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Reducción de la Fatiga Ocular
- Mejora de la Circulación Sanguínea.
- Hidratación de la Piel
- Eliminación de Bolsas y Ojeras
- Relajación de los Músculos Oculares



Resultados:

Corto Plazo: Aliviando la fatiga ocular y proporcionando una sensación de frescura e hidratación inmediata, con una notable reducción de la hinchazón y las ojeras después de las primeras aplicaciones.

Largo Plazo: Con el uso regular, los usuarios pueden notar una mejora en la elasticidad de la piel, reducción de las arrugas finas alrededor de los ojos, y un aspecto más rejuvenecido y descansado.



SPA OCULAR REJUVENECEDOR

Especificaciones Técnicas

<i>Peso neto</i>	1,4 Kilogramos	<i>Frecuencia de Ultrasonido</i>	1,7 Megaciclos
<i>Voltaje Clasificado</i>	AC 220V~	<i>Temperatura Operativa</i>	10 °C ~ 35 °C (50°F ~ 95°F)
<i>Frecuencia Clasificada</i>	50 Hz	<i>Humedad Relativa</i>	5% ~ 90% (sin condensación)
<i>Potencia Nominal</i>	140W	<i>Tamaño</i>	L 180 x W 178 x H 238 mm
<i>Iluminación (RGB)</i>	8.800 lux		



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec