



LÁSER DE DIODO CORPAX 2000

LÁSER DE DIODO CORPAX 2000



DESCRIPCIÓN

El innovador sistema de láser de diodo 3 longitudes de onda, es una nueva técnica desarrollada con altos estándares de calidad que depila en forma rápida, eficaz y virtualmente indolora, aplicable a todo tipo de piel y de vello. La luz pasa a través de la piel y es absorbido por la melanina en el tallo del cabello. Esta absorción eleva la temperatura del folículo piloso y térmicamente destruye las células responsables del recrecimiento.

Una innovadora plataforma de depilación que combina la máxima funcionalidad con incomparable comodidad. Gracias a su gran tamaño y sistema de enfriamiento avanzado, el tratamiento ahora son mucho más rápido y sin dolor, ofreciendo una significativa solución mejorada para pacientes y médicos, creando un nuevo enfoque único e impulsado por resultados, solución en el mundo de la depilación profesional.



LÁSER DE DIODO CORPAX 2000

Especificaciones Técnicas

LONGITUD DE ONDA	755nm/ 808nm/ 1064nm
PANTALLA	10" MULTICOLOR TACTIL
POTENCIA	1500W
CANTIDAD BARRAS DIODO	6
POTENCIA DIODO	600 W TIPO ALEMAN
TAMAÑO SPOT	12*16 mm
ENERGIA	2-120J/CM2 AJUSTABLES
ANCHO DE PULDO	8-685 Ms AJUSTABLES
FRECUENCIA	1-10HZ AJUSTABLES
SISTEMA DE REFRIGERACION	AGUA, AIRE Y SEMICONDUCTOR
TEMPERATURA DEL CABEZAL	2 A -3°C
VOLTAJE DE ENTRADA	110VAC/60HZ (220VAC BAJO PEDIDO)
SOFTWARE	INTELIGENTE, MODULA LOS PARAMETROS SEGÚN LA ENERGIA PROGRAMADA
CANTIDAD AGUA	3 LITROS DE AGUA DESTILADA
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES
CAMBIO DE FILTRO	CADA 6 MESES

GARANTIA	1 AÑO
CANTIDAD DE DISPAROSPIEZA DE	7 MILLONES GARANTIZADOS
SISTEMA DE VENTILACION	RENDIMIENTO MAXIMO 40MINUTOS CONTINUOS
ACCESORIOS	PEDAL, EMBUDO, MANGUERA, INTERLOCK, SOPORTE PIEZA DE MANO, CABLE DE PODER
MEDIDAS	65CM x 75 x 62cm
PESO	36 Kg
CANTIDAD DE SESIONES	1 A 8 MAX
EFFECTIVIDAD	DESDE LA PRIMERA SESION
LENGUAJE	ESPAÑOL
MODELO	FG-2000B
MESA	NO INCLUYE



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827




@imec_colombia



Imec

¿Cómo funciona el láser de diodo?

Durante el tratamiento, el láser que penetra en la piel es absorbido por la melanina en el folículo piloso, lo que hace que la temperatura del folículo piloso aumente y se detenga para generar melanina, lo que finalmente da como resultado una depilación permanente.

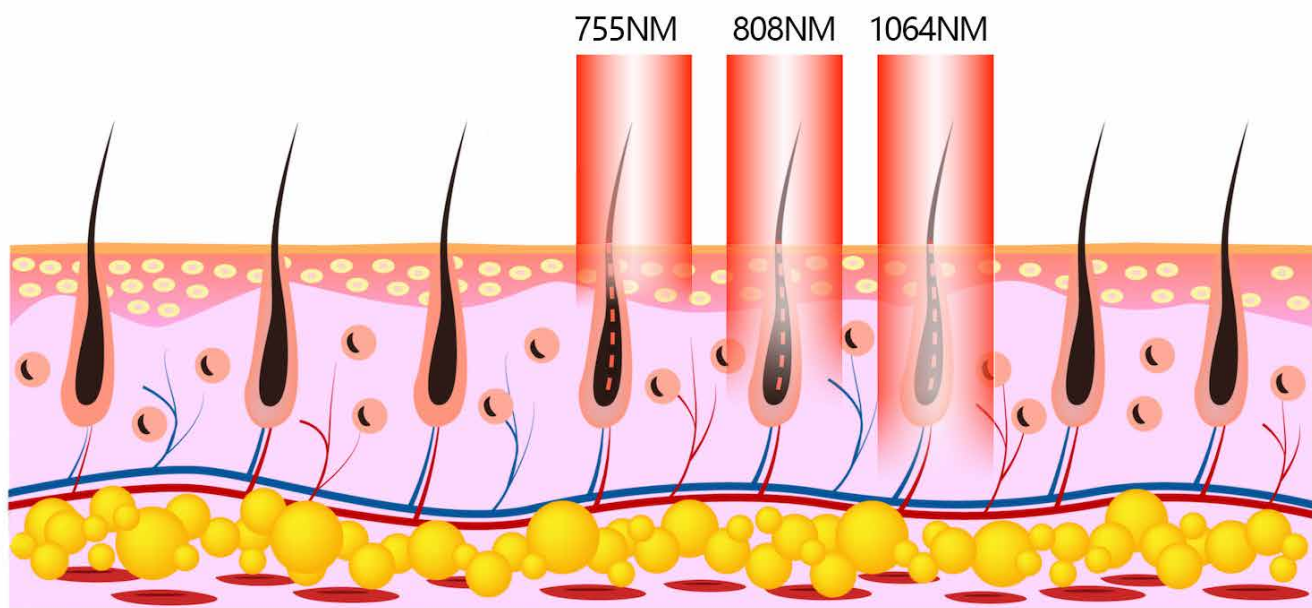

Tres longitudes de onda pueden penetrar diferentes profundidades de la piel, trabajando en diferentes profundidades del folículo piloso, lo que hace que el tratamiento sea más efectivo.

Diferentes tipos de color de piel están disponibles

					
TYPE I Light, pale white	TYPE II White, fair	TYPE III Medium, white to olive	TYPE IV Olive, moderate brown	TYPE V Brown, dark brown	TYPE VI Black, very dark brown to black

VENTAJAS TÉCNICAS

01. Resuelve

- Diseño de patente antihielo de 12*16 mm: mayor vida útil del mango
- Aplicador de 0,5 kg: más ligero



02. Punta cónica

- La punta cónica facilita la operación en la depilación de áreas pequeñas.



03. Beneficios

- El sistema de protección inteligente garantiza un funcionamiento seguro
- El icono de 6 áreas registra el número de disparo



DATOS CLÍNICOS



Hombre, 39 años
Antes

Despues
4 tratamientos
2019.08.08 - 2020.01.01

Hombre, 26 años
Antes

Despues
5 tratamientos
2019.08.10 - 2020.01.20

